

# RELEVER LA CLIENTE DU SOL ET LA TRANSFÉRER AU LIT AVEC LE LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL

Équipement


## 1<sup>re</sup> étape : installer la toile double cuissarde

**Caractéristiques de la cliente** : pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans les membres inférieurs et supérieurs.



Avant d'utiliser le lève-personne, l'infirmière doit évaluer l'état de santé de la cliente. L'utilisation d'une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement.

### Étape 1

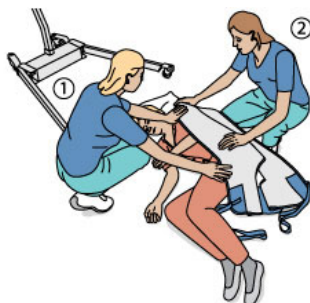


#### INTERVENANTE 1

- ♦ Placer un oreiller sous la tête de la cliente, puis tourner la cliente sur le côté.

#### INTERVENANTE 2

- ♦ Installer la toile sur la cliente en utilisant des repères afin de la centrer.
- ♦ Insérer une partie de la toile sous la cliente.

### Étape 2

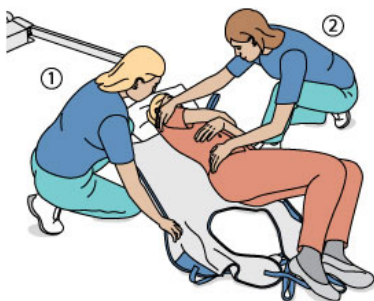


#### INTERVENANTE 2

- ♦ Ramener la cliente sur le dos et la tourner légèrement vers soi.

#### INTERVENANTE 1

- ♦ Sortir la toile placée sous la cliente et l'étendre.


### Étape 3

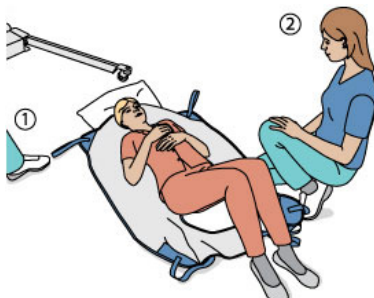

#### INTERVENANTE 2

- ♦ Ramener la cliente sur le dos, au centre de la toile.

### Étape 4

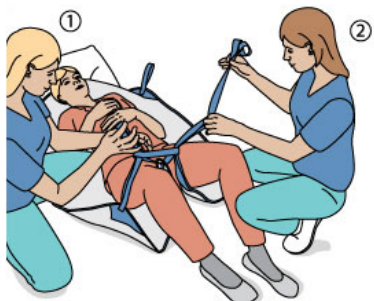

#### INTERVENANTES 1 ET 2

- ♦ Croiser les petites sangles l'une dans l'autre, puis insérer chacune des grandes sangles extérieures dans la boucle de la petite sangle.

**Mise en garde** : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.

# RELEVER LA CLIENTE DU SOL ET LA TRANSFÉRER AU LIT AVEC LE LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL

Équipement


## 2<sup>e</sup> étape : relever la cliente du sol

**Caractéristiques de la cliente :** pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans les membres inférieurs et supérieurs.



Avant d'utiliser le lève-personne, l'infirmière doit évaluer l'état de santé de la cliente. L'utilisation d'une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement.

### Étape 1

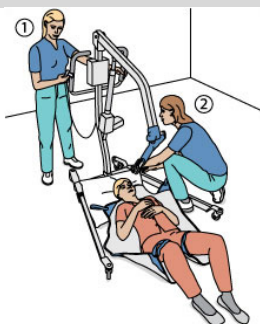

#### INTERVENANTE 1

- ♦ Ouvrir la base du lève-personne et l'approcher de la cliente.
- ♦ Appliquer les freins et descendre le cintre du lève-personne pour pouvoir y accrocher les sangles de la toile.

### Étape 2



#### INTERVENANTES 1 ET 2

- ♦ Accrocher les sangles de la toile au cintre du lève-personne.

### Étape 3



#### INTERVENANTE 1

- ♦ Actionner la manette du lève-personne pour relever la cliente.

#### INTERVENANTE 2

- ♦ Établir un contact visuel avec la cliente et la sécuriser.

### Étape 4



#### INTERVENANTE 1

- ♦ Lever la cliente à une hauteur facilitant son transfert sur une chaise ou sur un lit.

#### INTERVENANTE 2

- ♦ Sécuriser la cliente au besoin.

**Mise en garde :** la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.

# RELEVER LA CLIENTE DU SOL ET LA TRANSFÉRER AU LIT AVEC LE LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL

Équipement

## 3<sup>e</sup> étape : transférer la cliente au lit

**Caractéristiques de la cliente** : pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans les membres inférieurs et supérieurs.



Avant d'utiliser le lève-personne, l'infirmière doit évaluer l'état de santé de la cliente. L'utilisation d'une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement.


### Étape 1



#### INTERVENANTE 2

- ♦ Tourner la cliente de façon à ce qu'elle soit face au mât du lève-personne tout en gardant un bon contact visuel avec la cliente.

### Étape 2

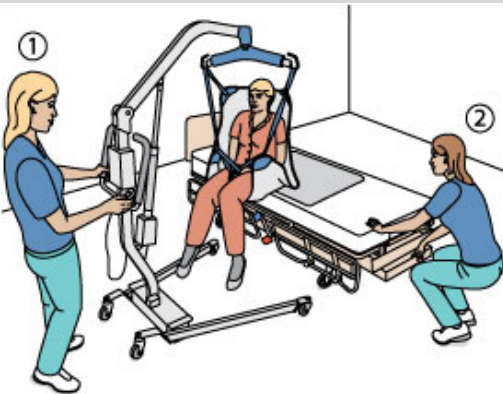


#### INTERVENANTE 1

- ♦ Rouler le lève-personne jusqu'au lit et l'ajuster en hauteur pour faciliter le positionnement de la cliente au lit.

#### INTERVENANTE 2

- ♦ Ajuster la hauteur du lit pour faciliter l'insertion de la base du lève-personne sous le lit.

### Étape 3

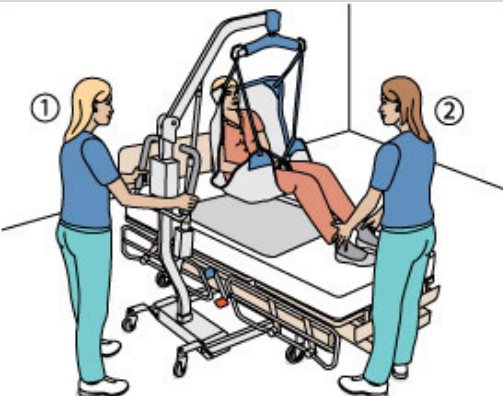

#### INTERVENANTE 1

- ♦ Descendre la cliente jusqu'à ce que ses fesses touchent le lit.

#### INTERVENANTE 2

- ♦ Tenir les pieds de la cliente et les déposer dans le lit.

**Mise en garde** : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.

# RELEVER LA CLIENTE DU SOL ET LA TRANSFÉRER AU LIT AVEC LE LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL

Équipement

## 4<sup>e</sup> étape : enlever la toile sous la cliente couchée

**Caractéristiques de la cliente :** pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans les membres inférieurs et supérieurs.



Avant d'utiliser le lève-personne, l'infirmière doit évaluer l'état de santé de la cliente. L'utilisation d'une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement.

### Étape 1



#### INTERVENANTES 1 ET 2

- ♦ Décrocher les sangles de la toile du cintre du lève-personne.
- ♦ Décroiser les petites sangles des cuissardes.
- ♦ Dégager les cuissardes sous les cuisses de la cliente.

### Étape 2



#### INTERVENANTE 1

- ♦ Tourner la cliente vers soi par transfert de poids avant arrière.

### Étape 3



#### INTERVENANTE 1

- ♦ Maintenir la cliente.

#### INTERVENANTE 2

- ♦ Insérer la toile sous la cliente.

### Étape 4



#### INTERVENANTE 2

- ♦ Tourner légèrement la cliente vers soi.

#### INTERVENANTE 1

- ♦ Retirer la toile sous le corps de la cliente.

**Mise en garde :** la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.