

Fauteuil roulant

Ces directives sont fournies à titre indicatif seulement. Utilisez ce produit en vous conformant aux instructions de votre fournisseur de soins médicaux.

À quoi sert un fauteuil roulant?

Un fauteuil roulant est un appareil qui procure une mobilité fonctionnelle aux personnes qui ont de la difficulté à marcher ou qui en sont incapables. Le fauteuil roulant peut être mû par l'utilisateur.

Comment utiliser le fauteuil roulant?

⚠ AVERTISSEMENT Pour que l'appareil soit utilisé en toute sécurité, il est essentiel que l'utilisateur du fauteuil roulant soit stable et qu'il puisse conserver son équilibre. Pour assurer votre stabilité et votre équilibre, vous devez respecter les consignes suivantes :

- si l'appareil est muni d'une ceinture de sécurité, utilisez-la toujours;
- ne prenez pas place dans le fauteuil roulant s'il n'est pas complètement déplié et que les freins ne sont pas engagés;
- si vous vous penchez vers l'avant, ne dépassez pas le bout des appuie-bras ①, et assurez-vous que les chasses de roue ② pointent vers l'avant;
- n'essayez pas de ramasser des objets qui sont par terre si vous devez vous pencher vers l'avant pour les atteindre;
- ne transférez pas votre poids vers l'objet que vous tentez d'atteindre car le fauteuil roulant pourrait basculer;
- ne vous penchez pas par-dessus le dossier du fauteuil roulant ③. Ce mouvement pourrait faire basculer l'appareil;
- n'essayez pas de monter sur des bordures de trottoir ou de passer sur d'autres obstacles. Le fauteuil roulant pourrait alors basculer et vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil;
- n'inclinez pas le fauteuil roulant sans l'aide d'une autre personne;
- n'utilisez pas un escalier mécanique pour déplacer le fauteuil roulant d'un étage à un autre. Vous risqueriez de vous blesser grièvement;
- n'essayez pas de monter ou de descendre une surface inclinée qui est mouillée, glacée ou huileuse;
- ne traversez pas, ne montez pas et ne descendez pas des rampes d'accès ou des surfaces inclinées dont l'angle dépasse neuf degrés (9°).

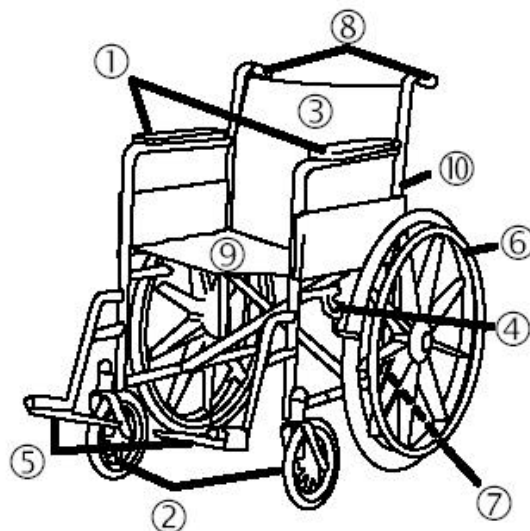


Figure 1 : Fauteuil roulant

Sortir du fauteuil roulant

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que les freins ④ sont engagés lorsque vous prenez place dans le fauteuil roulant ou lorsque vous en sortez.

⚠ AVERTISSEMENT Consultez votre fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils sur la façon la plus sûre de prendre place dans le fauteuil roulant et d'en sortir.

Déplacer le fauteuil roulant

Fauteuil roulant mû par l'utilisateur

- Pour avancer, désengagez les freins ④, tenez les mains courantes ⑥ fixées aux roues arrière et poussez vers l'avant.
- Pour reculer, désengagez les freins ④, tenez les mains courantes ⑥ fixées aux roues arrière et tirez vers l'arrière.
- Essayez d'amener les mains courantes ⑥ le plus loin possible. De cette façon, le fauteuil se déplacera plus facilement et son mouvement sera plus fluide.



Fauteuil roulant poussé par une autre personne

⚠ AVERTISSEMENT La personne qui pousse un fauteuil roulant doit adopter une posture adéquate pour ne pas se blesser elle-même. Elle doit se tenir le dos droit et fléchir les genoux chaque fois qu'elle incline le fauteuil ou qu'elle le fait monter sur un trottoir.

⚠ AVERTISSEMENT La personne qui pousse un fauteuil roulant doit toujours informer la personne assise dessus de ce qu'elle fait, et elle doit éviter de faire des mouvements brusques.

- Pour monter sur un trottoir : approchez-vous de la bordure du trottoir à angle droit. Dites à l'utilisateur du fauteuil roulant que vous allez bientôt incliner le fauteuil, afin qu'il se penche vers l'arrière. Inclinez le siège vers l'arrière en mettant le pied sur la barre d'inclinaison ⑦, puis placez les deux roues avant sur le dessus du trottoir. Faites monter les roues arrière sur le trottoir en tirant les poignées ⑧ vers le haut.
- Pour descendre d'un trottoir : Faites descendre le fauteuil roulant lentement, à reculons.

⚠ AVERTISSEMENT Deux personnes sont nécessaires pour incliner un fauteuil roulant sans utiliser de barre d'inclinaison ⑦. L'une doit se placer à l'avant du fauteuil et l'autre à l'arrière.

Déplier le fauteuil roulant

Si vous êtes debout

- Placez-vous devant le fauteuil roulant.
- Saisissez les côtés du siège du fauteuil ⑨ et exercez une pression vers le bas et vers l'extérieur. Gardez vos doigts orientés vers l'intérieur (vers le centre) pour éviter de les coincer. Appuyez vers le bas jusqu'à ce que le fauteuil roulant soit complètement déplié.

Si vous êtes assis

- Saisissez la tige de dossier ⑩ qui se trouve le plus près.
- Inclinez le fauteuil roulant vers vous, en soulevant les roues qui sont du côté opposé.
- Poussez sur le dessus de l'appuie-bras ① qui se trouve le plus près de vous, à l'endroit où est rattaché le matériau du siège ⑨, jusqu'à ce que le fauteuil roulant soit complètement ouvert.

Plier le fauteuil roulant

Si vous êtes debout

- Placez les repose-pieds ⑤ en position verticale.
- Placez-vous à côté du fauteuil roulant.
- Agrippez l'avant et l'arrière du siège ⑨ en plaçant vos mains au centre du fauteuil.
- Soulevez jusqu'à ce que le fauteuil roulant soit complètement plié.

Si vous êtes assis (Figure 2)

- Placez les repose-pieds ⑤ en position verticale.
- Agrippez l'arrière du siège ⑨ avec vos deux mains. Vos mains doivent être à mi-chemin entre les tiges de dossier ⑩. Tirez vers le haut.
- Continuez de plier le fauteuil en saisissant la tige de dossier ⑩ la plus éloignée et en ramenant l'appuie-bras ① vers vous.

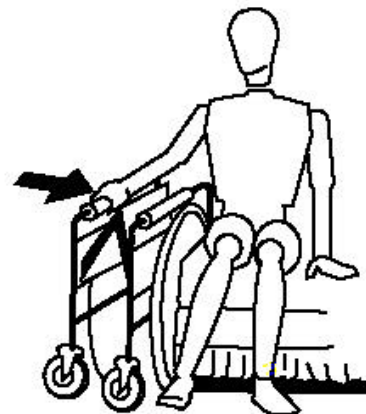


Figure 2 : Plier le fauteuil roulant

Veillez vous assurer que les appareils sont propres et en bon état lorsqu'ils sont rendus à la Croix-Rouge.